


HKN-Hannoversche Klumpfuß-Nachtschiene

Patent Nr. P 2651469.2-34

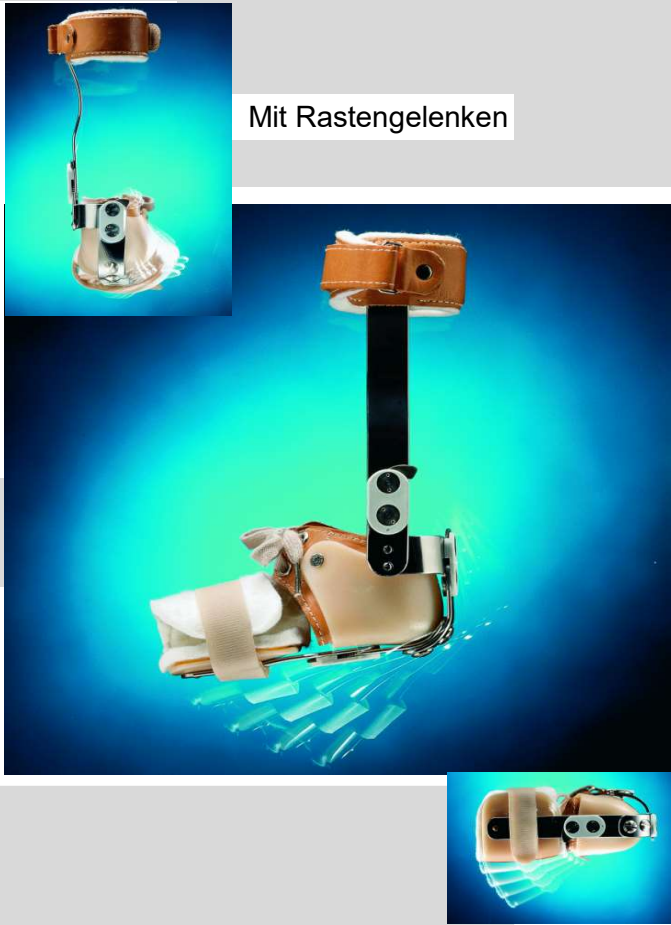

Mit Rastengelenken

Mit dieser Nachtschiene können die drei Fehlstellungen Spitzfuß (pes equinus), Verkantung auf den äußeren Fußrand (pes varus) und Einwärtsschwenken des Vorfußes (pes adductus) manuell redressiert werden.

Die Nachtschiene wird in Fehlstellung angezogen, dann erfolgt die Redression in kleinen, voneinander unabhängigen Schritten. Die Korrekturschritte sind feinfühlig durch Rastengelenke einzustellen. Die Patienten werden beim Schlafen durch vorstehende Hebel und Züge nicht behindert.

Nachstehende Redressionsfolge ist unbedingt einzuhalten.

- Korrektur der Verkantung auf dem Außenrand (pes varus)
- Korrektur des Einwärtsschwenkens des Vorfußes (pes adductus)
- Korrektur des Spitzfußes (pes equinus)

Indikation:

- für rebellische Klumpfüße
- für schwer korrigierbare Klumpfüße
- bei Recidiven, prä- und postoperativ

Verordnung

Hannoversche Klumpfuß-Nachtschiene mit Rastengelenken

Bei Bestellungen bitte Seite rechts oder links angeben

Artikelnummern: Hannoversche Klumpfuß-Nachtschiene

(anprobefertig)

Art.-Nr	Größe	Fußlänge in mm
041	00	90 - 100
042	0	100 - 110
043	1	110 - 125
044	2	125 - 145
045	3	145 - 165
046	4	165 - 180
047	5	180 - 200

Artikelnummern: Hannoversche Klumpfuß-Nachtschiene als Sichelfußschiene

(anprobefertig, ohne obere Gelenke)

Art.-Nr	Größe	Fußlänge in mm
041 / 1	00	90 - 100
042 / 1	0	100 - 110
043 / 1	1	110 - 125
044 / 1	2	125 - 145
045 / 1	3	145 - 165
046 / 1	4	165 - 180
047 / 1	5	180 - 200